



Sistema de inmovilización Pediátrico PA-190

Manual de Instrucciones

PARTE 1 – INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1.1 Alertas de seguridad

Las alertas de seguridad identifican peligros a evitar. Las siguientes alertas de seguridad aparecen en este manual.

CUIDADO:

- El uso inadecuado puede causar lesiones. Use el sistema de inmovilización pediátrica solo como se describe en este manual
- La operación incorrecta puede causar lesiones. Use el sistema de inmovilización pediátrica solo como se describe en este manual.
- El mantenimiento inadecuado puede causar lesiones. Mantenga el sistema de inmovilización pediátrica solo como se describe en este manual.

El producto cumple con la normativa 93/42 / CEE sobre dispositivos médicos.

1.2 Cajas importantes

Los cuadros importantes se utilizan en este manual para resaltar y enfatizar la información relacionada con el texto inmediatamente anterior al cuadro

1.3 Etiquetas

Las etiquetas colocan información importante del manual del usuario en el Sistema de inmovilización pediátrica donde está disponible para las personas que no hayan visto el manual.

PARTE 2 – APRENDER SOBRE EL SISTEMA DE INMOBILIZACIÓN PEDIÁTRICA

2.1 Descripción


El modelo es un dispositivo diseñado para ayudar a estabilizar e inmovilizar a un paciente pediátrico con traumatismo.

El sistema de inmovilización pediátrica es para uso profesional por un mínimo de dos operadores capacitados.

Las características del sistema de inmovilización pediátrica incluyen un tablero de madera contrachapada con una cubierta de nylon removible, un sistema de restricción ajustable codificado por colores, un soporte para la cabeza, asa de elevación y lazos de sujeción de la cuna. Incluido con el sistema de inmovilización pediátrica se incluye un estuche, una inmovilización pediátrica Sistema, y dos reposacabezas.

2.2 Especificaciones generales y componentes

Las especificaciones se redondean a números enteros

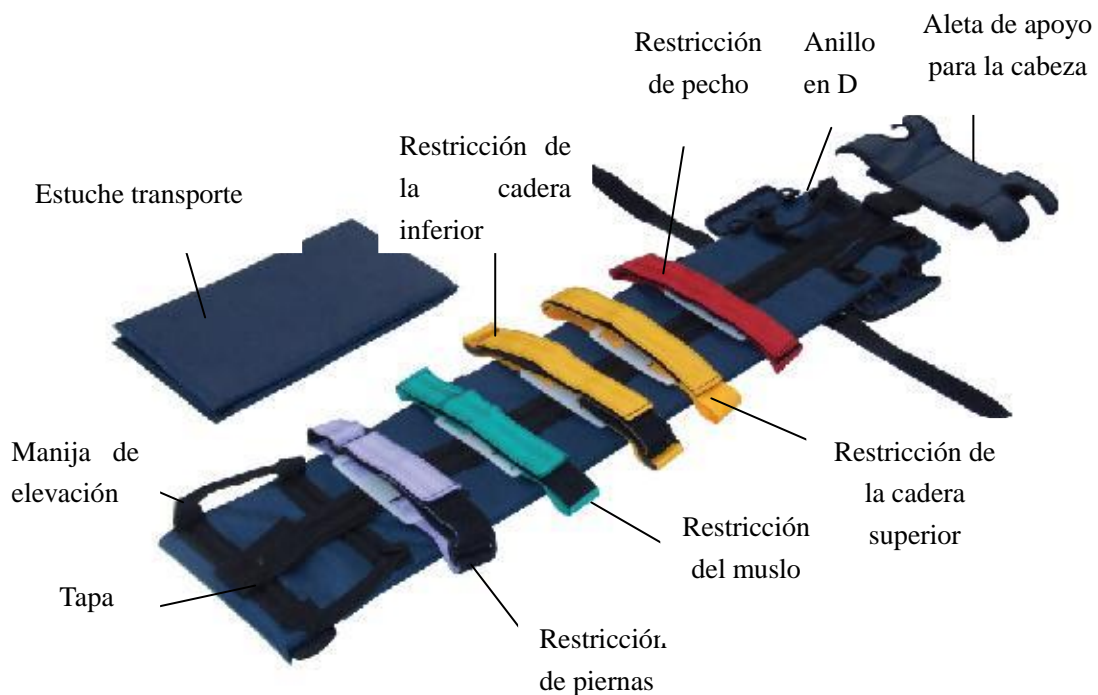

PARTE 3 – USANDO EL SISTEMA DE INMOBILIZACIÓN PEDIÁTRICA

3.1 Configurar el sistema de inmovilización pediátrica

1. Retire el sistema de inmovilización pediátrico de su estuche
2. Colocar el Sistema de Inmovilización Pediátrica además del paciente.
3. Coloque la parte superior de los reposacabezas en línea con la parte superior de los hombros del paciente
4. Aflojar y dejar a un lado las restricciones.



5. Alinee las ranuras del soporte para la cabeza con las orejas del paciente /

6. Abra el soporte para la cabeza.

Alinee las restricciones codificadas por colores con los pacientes de la siguiente manera:

Restricción de pecho (rojo), incluso con las axilas del paciente.

Restricción de la cadera superior (amarillo): justo por encima de las caderas del paciente

Restricción de la cadera inferior (amarillo): justo debajo de las caderas del paciente.

Restricción de muslos (verde): justo por encima de las rodillas del paciente.

Restricción de piernas (azul), incluso con los tobillos del paciente.

7. Cuando sea necesaria la inmovilización individual de la pierna, fije el sujetador de la pierna.

3.2 Aplicar el Sistema de Inmovilización Pediátrica.

1. Transfiera al paciente al Sistema, mantenga la estabilización de la cabeza y el cuello del paciente durante la transferencia y mientras aplica el Sistema de Inmovilización Pediátrica.

2. Fije las restricciones codificadas por colores sobre el paciente en una secuencia progresiva.

3. Sujete los reposa manos.

4. Apretar las restricciones para limitar el movimiento pero no para impedir la circulación.

5. Coloque los reposacabezas sobre los hombros del paciente y fije los reposacabezas al reposacabezas.

6. Sujete las restricciones de tobillo para la inmovilización individual de la pierna, si es necesario.

7. Coloque un freno de frente en la frente del paciente.

8. Presione la restricción de la frente contra las tiras de sujeción en los lados de las aletas de apoyo para la cabeza.

9. Enhebre cada extremo de la restricción de la frente a través de un anillo en D ..

10. Fije el extremo de la restricción de la frente a la tira de sujeción en la parte superior de la restricción de la frente. Apretar la restricción de la frente cómodamente.

11. Utilice la segunda correa de la frente para asegurar la barbilla del paciente, si es necesario.

12. Envuelva el soporte para la cabeza alrededor de la cabeza del paciente. Las ranuras en el soporte para la cabeza deben estar alineadas con las orejas del paciente.

3.3 Transporte del Paciente

1. Use una cuna de ambulancia equipada con tres restricciones.

2. Desate las restricciones de la cuna.

3. Utilice las asas de elevación para levantar al paciente inmovilizado en un sistema de inmovilización pediátrica sobre la cuna.

4. Para asegurar el sistema de inmovilización pediátrica a la cuna, pase la restricción de la cuna del extremo de la cabeza a través del bucle de fijación de la cuna en la cabecera del sistema de inmovilización pediátrica.

5. Sujete el reposacabezas del cabecero.

3.4 Retirar al paciente del sistema de inmovilización pediátrica

1. Desatar las restricciones.

2. Traslade al paciente fuera del sistema de inmovilización pediátrica.



Nota: Informe al personal de la sala de emergencias que no es necesario cortar las restricciones.

3. Los reposacabezas y los bucles de fijación de la cuna no son reemplazables.
4. Si las restricciones de colores están cortadas o dañadas, hay restricciones de reemplazo disponibles.

3.5 Empaque el sistema de inmovilización pediátrica

1. El sistema de inmovilización pediátrico debe estar completamente seco antes de ser empacado.
2. Inserte el tablero en la cubierta y cierre la tapa.
3. Acople el soporte para la cabeza y el sistema de inmovilización pediátrico, y ajuste las restricciones.
4. Deslice el sistema de inmovilización pediátrico en su estuche.

3.6 Desinfección del sistema.

1. Desinfecte la Inmovilización Pediátrica después de cada uso.
2. Retire el soporte para la cabeza y el sistema de inmovilización pediátrico.
3. Abra la tapa de la tapa y retire el tablero.
4. Limpie todas las superficies con desinfectante. Seguir